

Everyone's
happy



2026-05-22 MIRUBBNL NLP.01

*Help uw klanten
volop genieten van
het leven met
Miru 1day UpSide*



www.menicon.nl

Contactlenzen kunnen levens veranderen

Er zijn zoveel manieren waarop contactlenzen een positieve invloed kunnen hebben op het leven van uw klanten.

Van flexibiliteit en vrijheid tot gemak, uw klanten kunnen elke dag volop genieten van het leven dat ze willen leiden.



“Contactlenzen zijn zoveel handiger.”
- Debbie Veal



Uw klanten stellen hun gezondheid en welzijn voorop

Consumenten stappen af van goedkope alternatieven en kiezen liever voor kwaliteitsproducten die ze kunnen vertrouwen. Deze betrouwbaarheid, gecombineerd met gemak, beïnvloedt hun keuzes en verklaart waarom ze kiezen voor een lens van hoge kwaliteit waarop ze kunnen rekenen.



Comfort en handling zijn essentieel



94%

van de dragers zegt dat
ze graag een makkelijkere
handling zouden willen¹



50%

van de dropouts stopt
vanwege ongemak²

1 Interne gegevens Menicon, 2022. Klinisch onderzoek naar daglenzen (n=33)

2 Nichols et al. TFOS Int. Workshop over
contactlensongemak: IOVS, oktober 2013

3 Interne gegevens Menicon, 2023. Vision Needs




*Verbeterd
comfort is een
topprioriteit om
over te stappen³*

Siliconen hydrogel lenzen bieden hoger comfort en helpen klanten langer contactlenzen te dragen

1day siliconen hydrogel lenzen kennen de hoogste groeicijfers, een bewijs van hun uitstekende comfortniveau.

1day siliconen hydrogel lenzen kennen de hoogste groeicijfers

% Waardegroei ten opzichte van vorig jaar

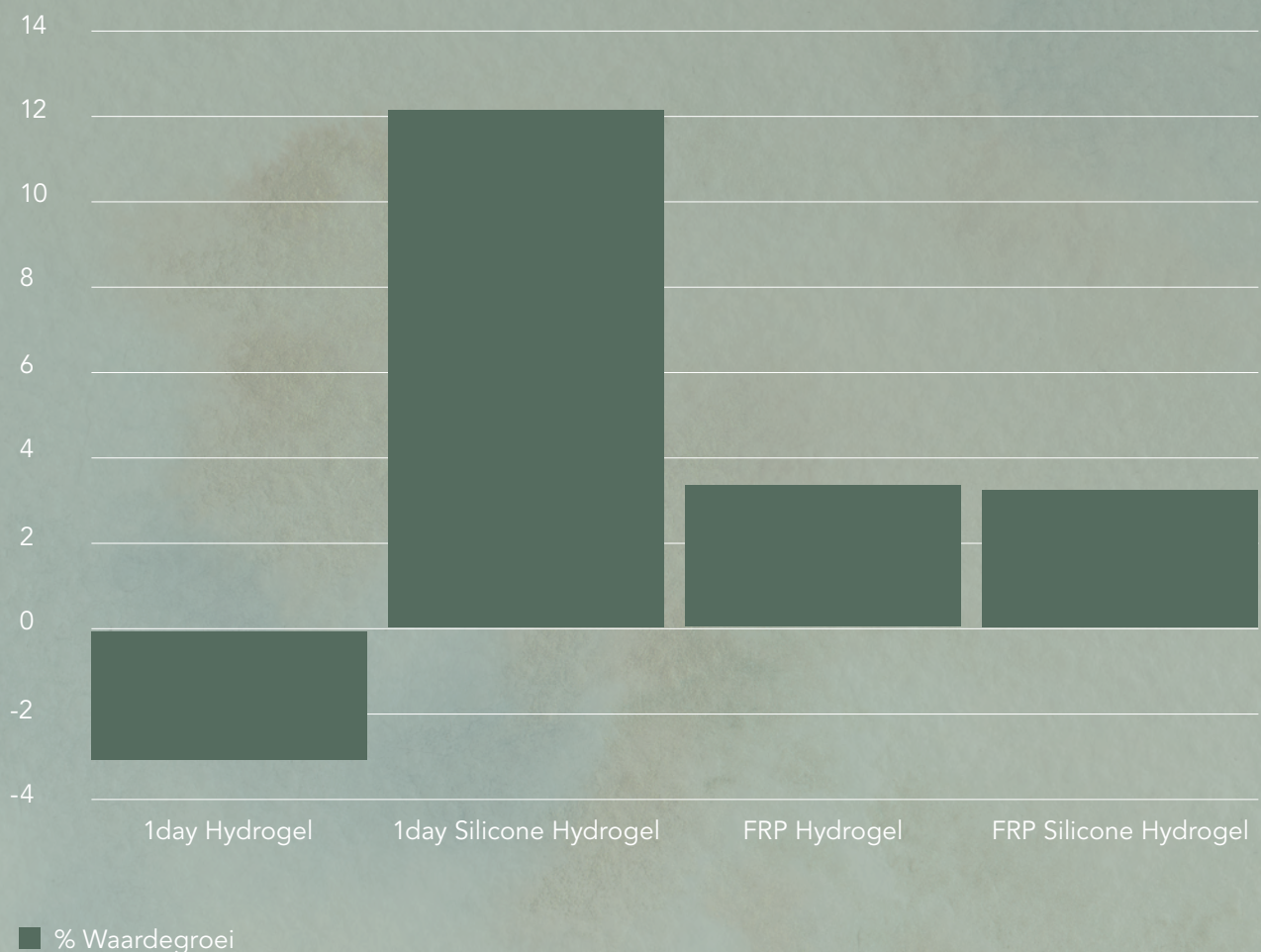

Miru 1day UpSide is een siliconen hydrogel lens die alles biedt

Een lens gericht op comfort

Verbeter het leven van uw klanten met een hooggewaardeerde lens.



85%

van de dragers beoordeelde het comfort als uitstekend of goed ¹



Uitstekende bevochtiging, ultra lage modulus en een wrijvingsarm oppervlak voor optimaal comfort.



Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid voor heldere en stralend witte ogen.

Geef uw klanten de mogelijkheid om hun beste leven te leiden, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.

1 Interne gegevens Menicon, 2021. Klinisch onderzoek naar daglenzen (n=28)



SMART TOUCH™

*Maak het leven van uw klanten
eenvoudiger en comfortabeler
met Smart Touch™ technologie*

Een premium lens zonder premium prijs, Miru 1day
UpSide bevat innovatieve Smart Touch™ technologie,
de eerste in zijn soort. Dit maakt de lens uniek.

Lenzen worden altijd op de juiste manier uit de blister
gehaald. Dit is niet alleen ideaal voor nieuwe dragers,
het vermindert ook dropouts en verkort de stoeltijd voor
de opticien.

Contactlenzen inzetten gaat


2x sneller,³

*waardoor dropouts
geminimaliseerd worden.*




Bij het overwegen van contactlenzen is de grootste
drempel voor klanten de moeilijke handling.

Daarom is er Smart Touch™, waarmee het hanteren
van lenzen sneller en eenvoudiger wordt voor
iedereen.

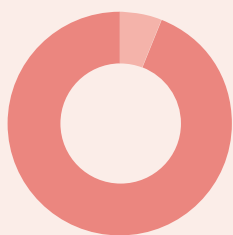

94%

van de dragers vindt het
gemakkelijk om de lens
uit de blister te halen¹

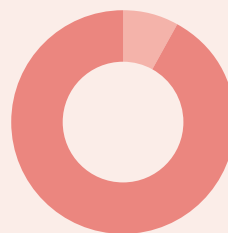


91%

van de Smart Touch™
dragers is het ermee eens
dat het een voordeel is
dat de lens altijd correct
gepositioneerd is²


1 Interne gegevens Menicon,
2022. Klinisch onderzoek
naar daglenzen (n=33)

2 Interne gegevens Menicon, 2017.
Online enquête onder huidige
daglensdragers (n=200)

3 Interne gegevens Menicon, 2017

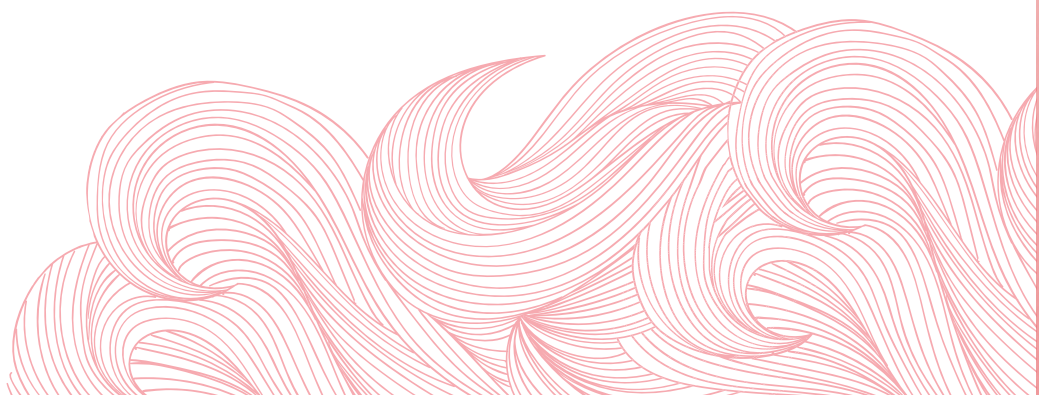

Ervaar eenvoudiger en hygiënischer
inzetten met Smart Touch™

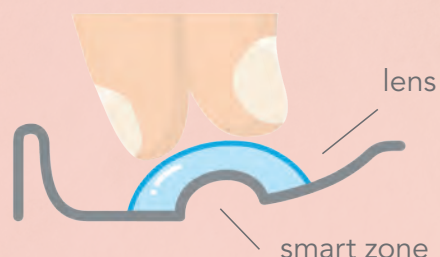

Smart Touch™

De unieke slimme zone in de blister zorgt ervoor dat het binnenoppervlak van de lens naar beneden is gericht, zo kan de lens ingezet worden zonder het binnenoppervlak aan te raken.



Conventionele blisters

Bij conventionele blisters is het binnenoppervlak van de lens naar boven gericht en kan de lens niet worden verwijderd zonder dit oppervlak aan te raken, wat leidt tot een grotere kans op besmetting.



*“Ik vind ze veel
sneller in gebruik,
pinch and go.”*

- Alex Blake





Hygiëne

Smart Touch™ technologie voor hygiënische handling

De drager raakt alleen het buitenoppervlak van de lens aan.

De unieke verpakking zorgt ervoor dat het binnenoppervlak schoon blijft tot het moment van inzetten.



1. Open de folie van de verpakking.



2. Knijp de lens tussen duim en wijsvinger.




3. Zet de lens op de wijsvinger, deze ligt meteen goed.



4. Plaats de lens op het oog.



Smart Touch™ technologie vermindert het risico op microbiële besmetting

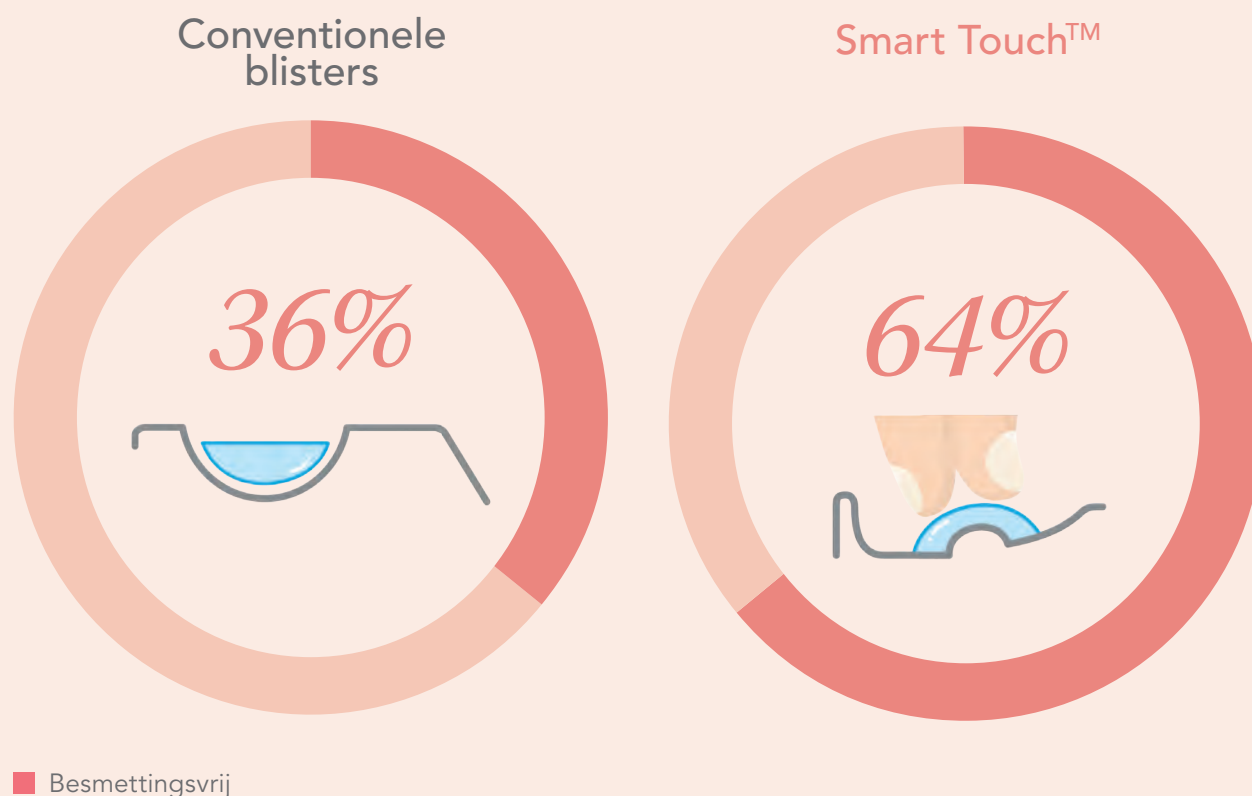

Verbeterde technologie
om contactlenzen
schoner¹
te houden



“Ik denk echt aan mijn gezondheid en hygiëne en het stelt mij gerust om te weten dat wanneer ik de lens uit de verpakking haal, het binnenoppervlak niets anders heeft aangeraakt.”

- Martin Saunders

¹ Een gerandomiseerde contralaterale niet-uitgifte studie (n=25). Klanten plaatsten de contactlens volgens instructie en na 45 minuten werd de microbiële besmetting op het binnenoppervlak van de lens geëvalueerd. De grafiek toont het percentage lenzen dat vrij was van besmetting.
Tan J et al.: Factors Affecting Microbial Contamination on the Back





Gezondheid

Ademende, dunne en gladde lenzen = gezonde ogen

Zuurstofdoorlaatbaarheid

MeniSilk™ Air technologie zorgt voor een hoge zuurstoftransmissie.

Bescherming


NanoGloss™ Pro technologie creëert een zeer glad oppervlak dat de hechting van bacteriële biofilms en lipiden vermindert.

Dikte

Miru 1day UpSide sferische, torische en multifocale designs optimaliseren de zuurstoftransmissie over het hele lensoppervlak, binnen het volledige sterktebereik.



Laat 100% van de zuurstof de ogen bereiken¹

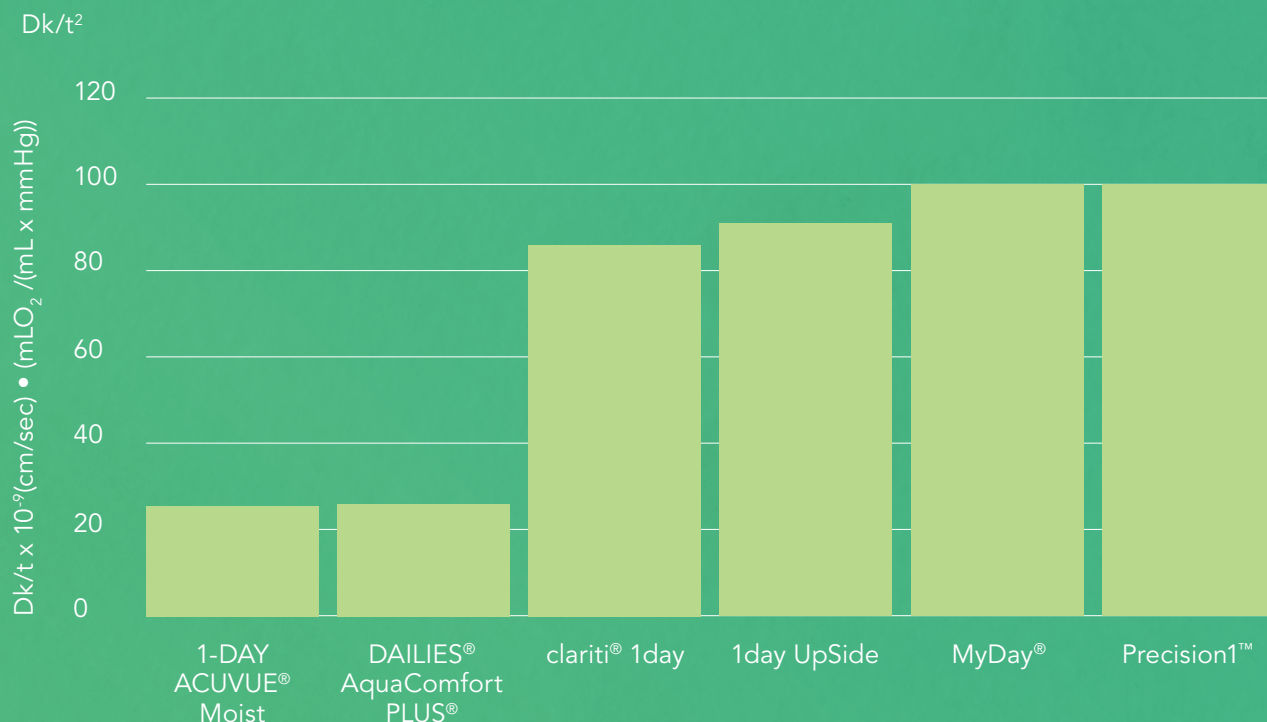


¹ Brennan NA: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005

² Gebaseerd op gegevens van de fabrikant, centrale dikte bij -3.00D

UV Filter

Samengesteld materiaal voor gezondheid en bescherming

Ingebouwde bescherming tegen schadelijke UV¹

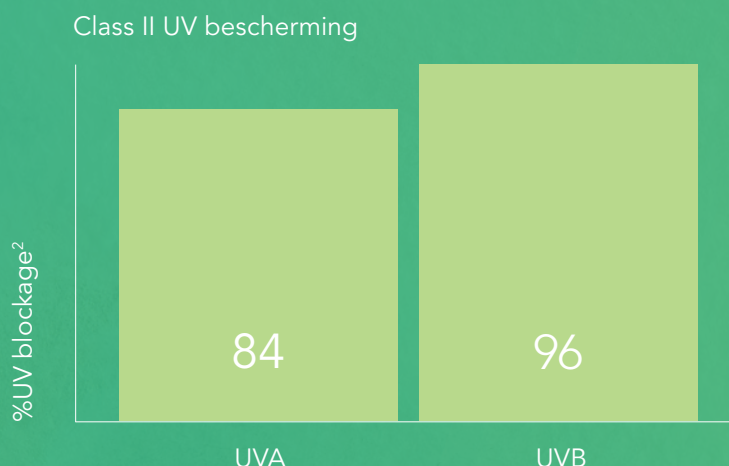


Comfort

Balans tussen design en materiaal voor optimaal draagcomfort

Comfortabel

Een uniek randprofiel dat, ongeacht de sterkte, dezelfde randdikte behoudt. Hierdoor zijn er geen verschillen in draagcomfort tussen beide ogen.

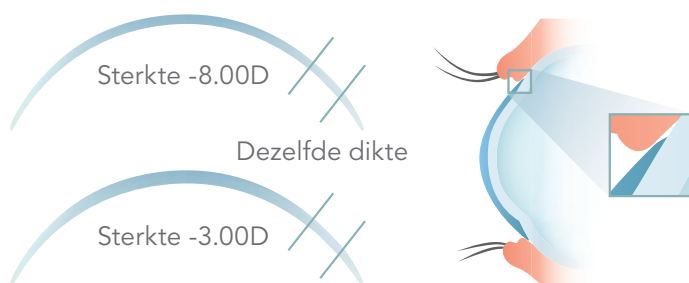

Het lensontwerp in combinatie met de ultra lage modulus zorgen voor goede vormbehoud en eenvoudigere handling.



“Wanneer ik comfortabele lenzen heb die de hele dag meegaan, geeft mij dat echt dat extra stukje zekerheid.”

- Tiffany Hibberd

¹ Waarschuwing: UV-absorberende contactlenzen zijn geen vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen en moeten altijd in combinatie met UV-absorberende zonnebrillen of beschermende brillen gedragen worden, zoals aanbevolen.

² @ -3.00 gegevens van de fabrikant



Een nieuwe generatie

Materiaal- en oppervlaktechnologieën
voor gezondheid en comfort

NanoGloss™ Pro


Een superglad oppervlak dat speciaal ontworpen is om het draagcomfort van dit ultrazachte materiaal te verbeteren.

- Nauwkeurigheid op nanometerniveau
- Wrijvingsarm oppervlak
- Sterk bevochtigbaar




Superglad oppervlak

Een zeer glad oppervlak met nanometernauwkeurigheid en lage wrijving, ontworpen voor een comfort, de hele dag lang.

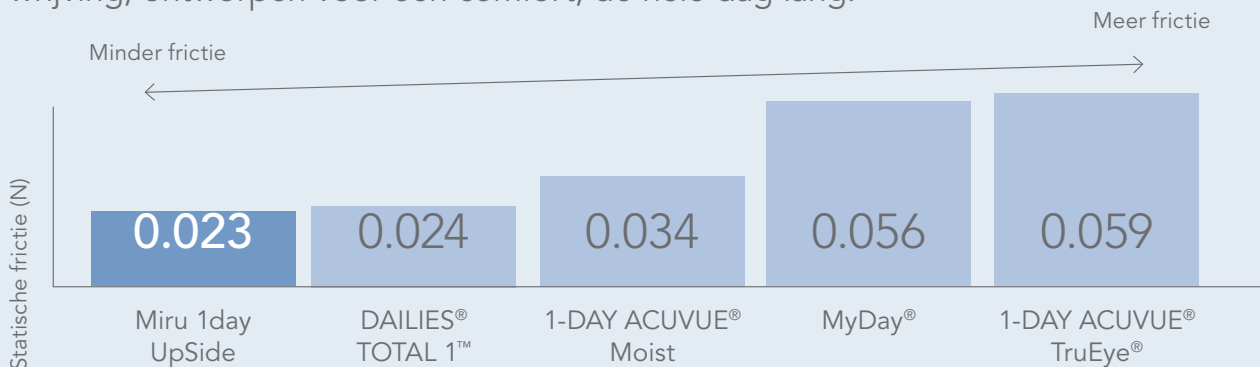


Interne gegevens Menicon, 2015

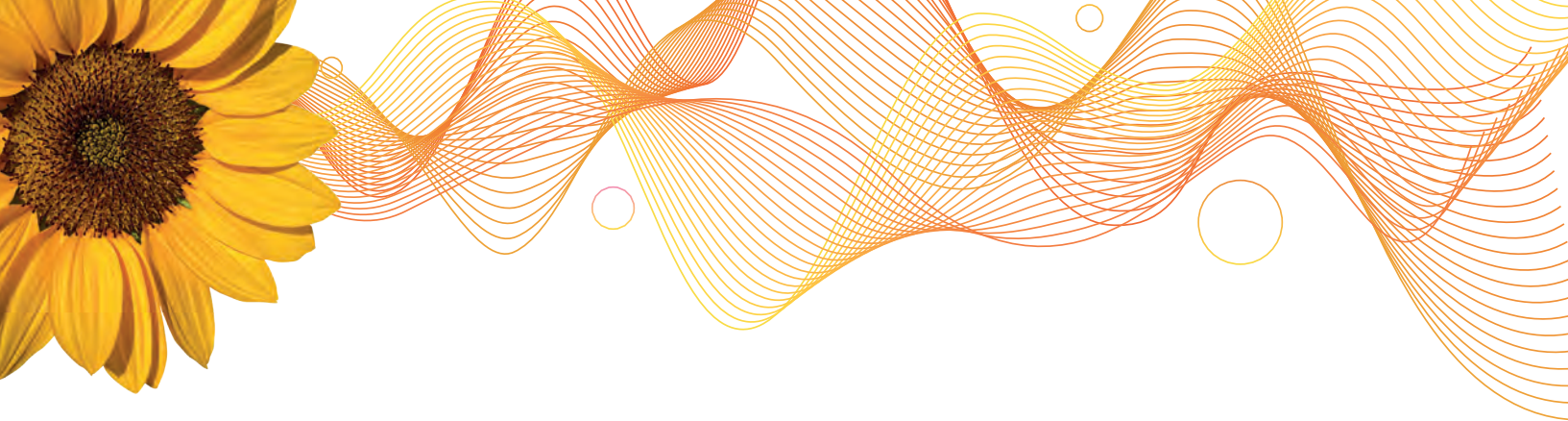

MeniSilk™ Air


Een nieuwe generatie siliconen hydrogel materiaal met ultra lage modulus, perfect in balans. voor gezondheid en comfort.

- Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid
- Ultra lage modulus
- Gebalanceerd watergehalte
- Uitstekende hydratatie

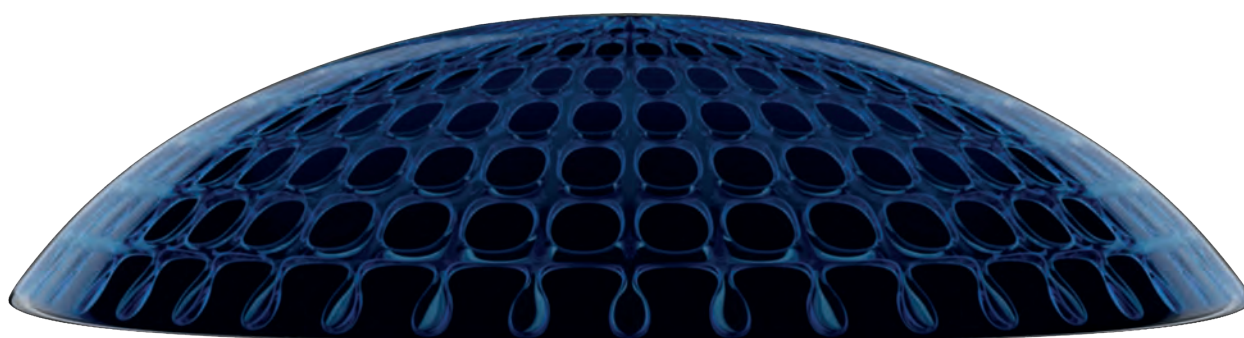

Uitzonderlijke zachtheid

Ultra lage modulus die de soepelheid van hydrogel combineert met het gebruiksgemak van siliconen.

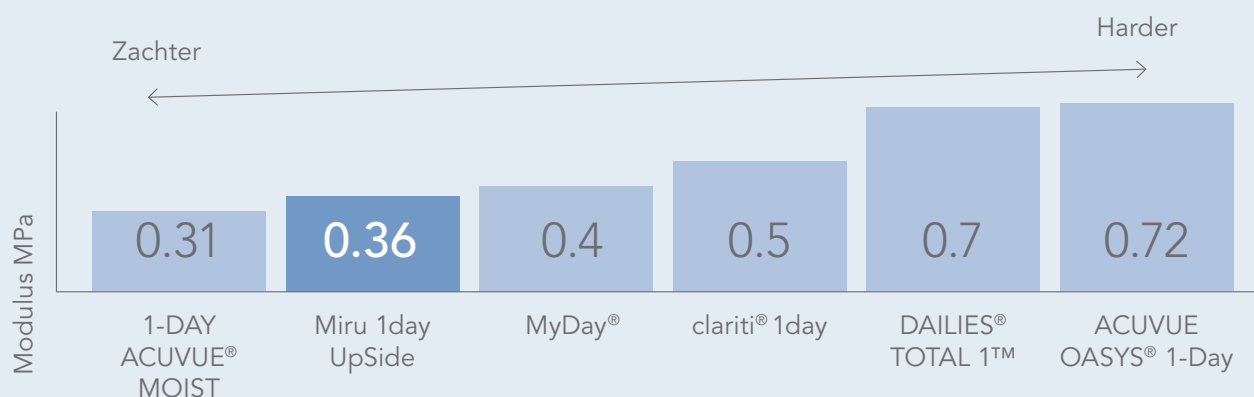

Gegevens van de fabrikant

Miru 1day UpSide Toric



*100% beoordeeld op gemak van inzetten
en stabiliteit van het zicht¹*

Ontdek verbeterd comfort, gemak en prestaties met Miru 1day UpSide Toric.

- De unieke asymmetrische verticale dunne zones sluiten aan op de natuurlijke bedekking van het hoornvlies. Ze benutten de natuurlijke knipperslag, optimalisert centrering en voorkomt rotatie.
- Dankzij Smart Fit stabiliseert de lens zich altijd correct en is deze gemakkelijk in te zetten.
- Het nieuwe slimme torische lensdesign houdt rekening met het natuurlijke anatomische profiel. Het dunne randprofiel zorgt voor optimaal comfort.



Het selecteren van torische contactlenzen is nog eenvoudiger met de Menicon toric calculator:



Scan en ontdek

toric.meniconcalculator.com



Verbeterd Visiostable design™

Het verfijnde ontwerp houdt rekening met de natuurlijke vorm van het oog en verbetert zo visuele stabiliteit en comfort.



Verticale dunne zones voor meer comfort en centrering

Voor illustratieve doeleinden

Achteraanzicht van de lens

Kleine verhoogde zones die lensstabiliteit ondersteunen en rotatie voorkomen.

Markering



“Ze zitten zo comfortabel dat ik vergeet dat ik mijn lenzen in heb.”

- Debbie Veal



Met
SMART TOUCH™
technologie voor 2 keer
sneller inzetten¹


¹ Menicon data on file, 2017



Uitstekende tevredenheid bij zowel opticiens als consumenten


Miru 1day UpSide toric heeft de hoogste score 'uitstekend' voor totale tevredenheid

Totala tevredenheid (deelnemers)

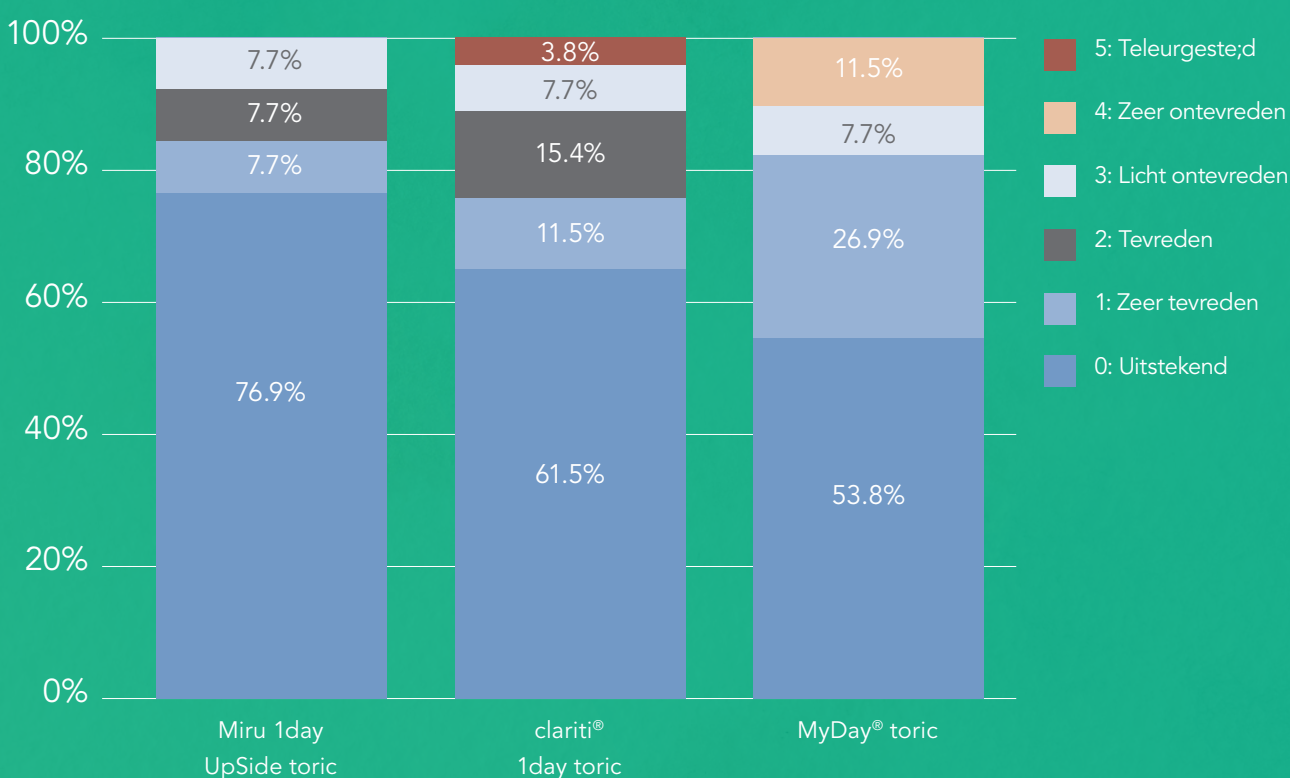

- UpSide toric heeft de hoogste score 'uitstekend' voor totale tevredenheid, zowel bij deelnemers als opticiens.

Tevredenheid opticiens

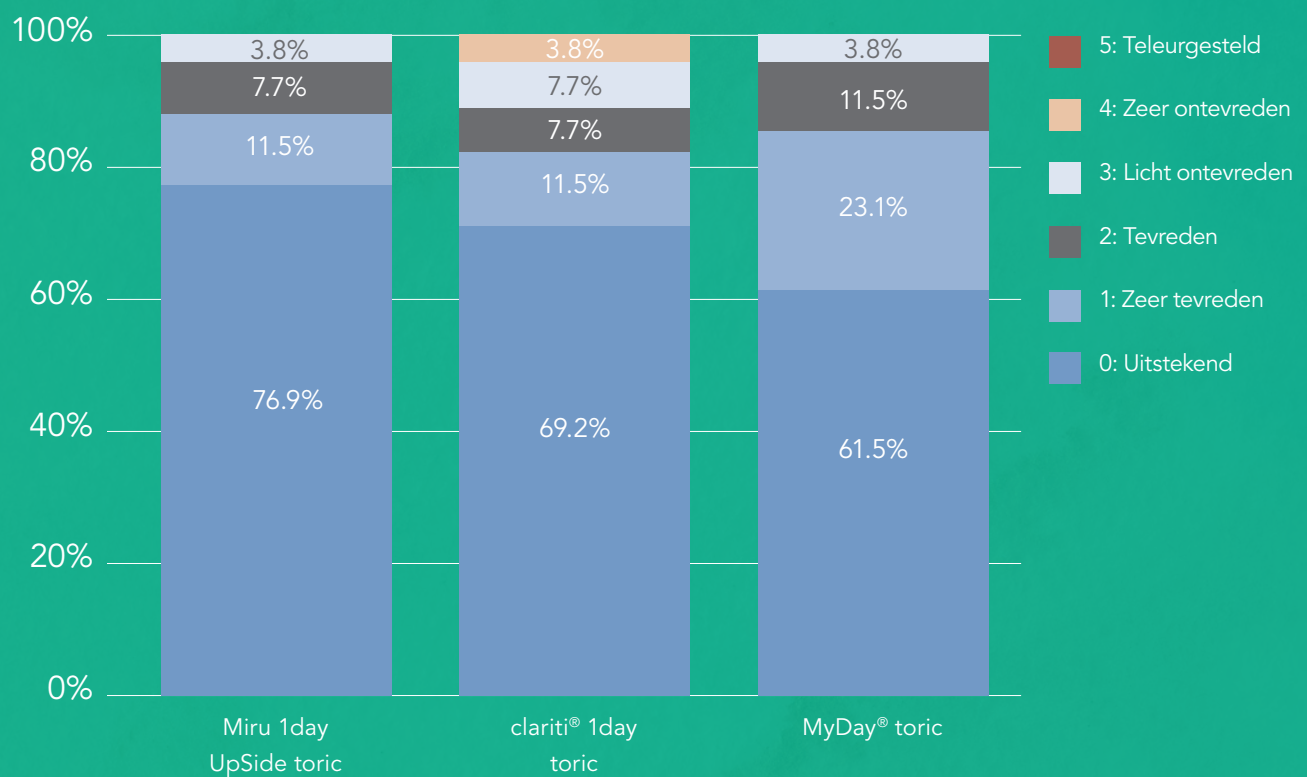

Interne gegevens Menicon, 2022 dagelijkse contactlens klinische studie (N=26)



Miru 1day UpSide Multifocal


*Ervaar helder en stabiel
zicht op alle afstanden.*

- Uitstekend comfort bij inzetten en comfort tot het einde van de dag
- De hoogste scores uitstekend/ goed voor totale tevredenheid²
- Hoge mate van aanpassing (92%) dankzij Neuro Adaptive™ design³



Eenvoudig in te zetten met uitstekende resultaten

Miru 1day UpSide Multifocal heeft een hoog succespercentage bij de eerste passing van 95% en 100% binnen 2 lenzen.¹

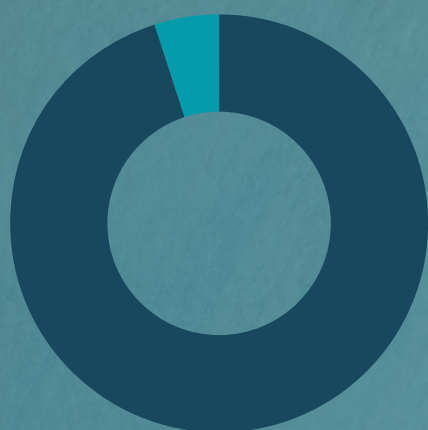

95%

succesvolle eerste passing met
Miru 1day UpSide Multifocal



“Het is echt fijn om een nieuwe optie te vinden die voor mij werkt. Ik heb nu goed en fijn zicht.”

- Tiffany Hibberd



Neuro Adaptive™ design

Balans tussen design en materiaal voor optimaal comfort.


Centre near zicht

- Progressieve multifocale geometrie met vloeiende overgangszones.
- Heeft een lage amplitude in sterkteverandering.
- Gemakkelijke gewenning door natuurlijke vloeiende overgangen tussen dichtbij, midden en veraf kijken.


Voordelen voor de drager

- Het Neuro Adaptive™ design zorgt voor optimaal draagcomfort.
- In onze moderne wereld kijken we steeds vaker langdurig dichtbij, wat meer van ons visuele systeem vraagt. Het design helpt mogelijke belasting te verminderen, verbetert het visuele comfort en maakt de gewenning eenvoudig dankzij het vloeiende en zachte profiel.

LOW

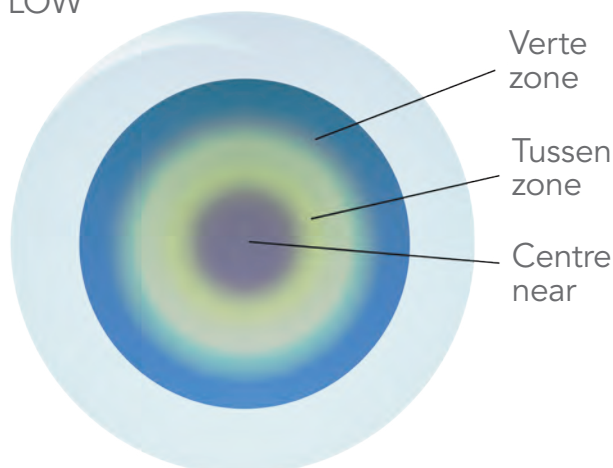

HIGH

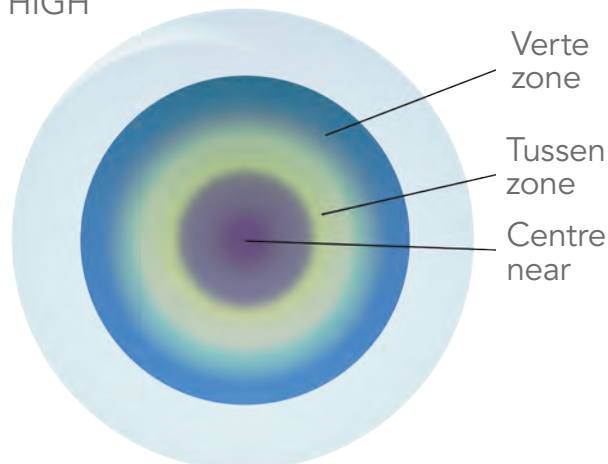

Alleen ter illustratie

Asferisch voorzijde
Sferisch achterzijde
Uniek randprofiel zorgt
voor dezelfde randdikte en
comfort bij alle sterktes

Multifocal aanpasadvies

Speciaal ontworpen om het aanpassen van multifocale lenzen eenvoudiger te maken.

- Maximaliseer de plussterkte tijdens de refractie op afstand.
- Houd rekening met verteafstand ($>+/-4D$) en sferische gemiddelde sferische equivalent bij astigmatisme tot 1dpt.
- Bepaal het dominante oog.
- Selecteer de initiële additie. Aanpassingen zijn meestal niet nodig. Bied eerst meer plus voor veraf aan, voordat je de additie aanpast.



Aanpas tip:

Bied altijd eerst de plus aan, zo nodig met de hoogste leesadditie. Optimaliseer de belichting, refractioneer zowel monoculair als binoculair maximaal in de plus uit.



Het aanpassen van contactlenzen is nog nooit zo eenvoudig geweest met onze online calculator of via Easyfit.
multifocal.meniconcalculator.com

Initiële lenskeuze



Additie +0.75D
tot +1.25D




Additie +1.50D
en hoger



Additie +2.00D
en hoger

Aanpassingen vertezicht

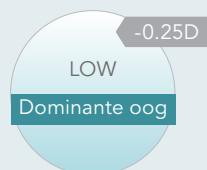

Verfijn
vertesterkte



Verfijn
vertesterkte



Verfijn
vertesterkte

Aanpassingen nabijzicht



Verhoog
plussterkte



Stap over
naar HIGH



Verhoog
plussterkte

Overzicht van Miru 1day UpSide vs concurrenten

Balans tussen design en materiaal voor optimaal comfort

	Miru 1day UpSide	MyDay®	clariti® 1day	1-DAY ACUVUE® Moist	DAILIES® AquaComfort PLUS®
Jaar van lancering	2018	2013	2009	2006	2007
Silicone Hydrogel	✓	✓	✓	✗	✗
DK/t ¹	91	100	86	25.5	26
UV	✓	✓	✓	✓	✗
Modulus < 0.4 MPa ²	✓	✗	✗	✓	✗
Glad oppervlak (wrijving < 0.03) ²	✓	✗		✗	
Gemak ⁴	✓✓	✓	✓	✓	✓
Hygiëne ⁵	✓✓	✓	✓	✓	✓
Smart Touch™ technologie	✓	✗	✗	✗	✗

1 Gebaseerd op gegevens van fabrikanten, centrale dikte @ -3.00D

2 Gegevens van de fabrikant

3 Interne gegevens Menicon, 2015

4 Interne gegevens Menicon, 2016

5 Tan J et al.: Factors Affecting Microbial Contamination on the Back Surface of Worn Soft Contact Lenses, Optom Vis Sci. 98(5): 512-517, 2021

Land van lancering:

VK:

Miru 1day UpSide

clariti® 1 day

MyDay®

VS:

1-DAY ACUVUE® Moist

DAILIES® AquaComfort PLUS®

Productspecificaties

Kenmerken		
Materiaal	sferisch, torisch en multifocaal	Midafilcon A
Watergehalte	sferisch, torisch en multifocaal	56%
Handling tint	sferisch, torisch en multifocaal	Blauw
Dk/t@-3.00D	sferisch en multifocaal torisch	91x10 ⁻⁹ (cm/sec) . (mLO ₂ /(mL x mmHg)) 80x10 ⁻⁹ (cm/sec) . (mLO ₂ /(mL x mmHg))
Modulus	sferisch, torisch en multifocaal	0.36 MPa
Centrale dikte	sferisch en multifocaal torisch	0.07mm 0.08mm
Productieproces	sferisch, torisch en multifocaal	Giettechniek
UV	sferisch, torisch en multifocaal	Klasse 2

Parameters		
Basiscurve	sferisch, torisch en multifocaal	8.4mm
Diameter	sferisch, torisch en multifocaal	14.2mm
Sterkte	sferisch	+6.00D tot +0.25D (stappen van -0.25D) -0.25D tot -6.00D (stappen van -0.25D) -6.50D tot -13.00D (stappen van -0.50D)
	torisch	+0.00D tot -6.00D (stappen van 0.25D) -6.50D tot -10.00D (stappen van 0.50D)
	multifocaal	+5.00D tot -6.00D (stappen van -0.25D) -6.50D tot -10.00D (stappen van -0.50D) Additie: LOW and HIGH
Cilinder	torisch	-0.75D, -1.25D, -1.75D
As	torisch	10° tot 180° (stappen van 10°)

Lens markering	sferisch en multifocaal	
	torisch	

Draagschema		
Draagschema	sferisch, torisch en multifocaal	Dagelijks vervangen

Verpakking		
	sferisch, torisch en multifocaal	30-pack. Paslens: 5-pack



Geef uw klanten meer vrijheid met Miru 1day UpSide



- Uitzonderlijk zachte Silicone Hydrogel daglens¹
- Uitstekend comfort
- Unieke Smart Touch™ technologie voor hygiënisch handling
- 2x sneller in te zetten²
- Eenvoudige en succesvolle passing³
- Uitstekend zicht⁴

Met
SMART TOUCH™
technologie voor
2x sneller²
inzetten



1 Gebaseerd op de combinatie van lage modulus, hoog watergehalte en een zeer glad oppervlak met lage wrijving.

2 Interne gegevens Menicon, 2017

3 Interne gegevens Menicon, 2021. Klinisch onderzoek naar daglenzen (n=19)

4 Interne gegevens Menicon, 2022. Klinisch onderzoek naar daglenzen (n=33)

Voor meer informatie, neem contact met
ons op via +31 (0) 591 610 640



www.menicon.nl